

**Mezoterapija,
skirta aktyvių
medžiagų
įvedimui**



ACCUderma kriomezoterapija remiasi mezoterapijos, sustiprinta transdermininės elektroporacijos poveikiu, kurios metu audiniai ir ląstelės sugeria mezoterapijos veikliąsias medžiagas trumpų elektrinių impulsų pagalba sukuriant laikinas mikro skylutes odoje.

šaltis MAX -15°C

karštis MAX +45°C


VEIKIMAS

Mezoterapija elektroporacijos būdu yra neinvazinė sistema, kuri veikia su trumpomis impulso bangomis, kurios yra neskausmingos. Šios bangos padidina ląstelių membranų pralaidumą sudarydamos mikrokanalelius, leidžiančius lengviau įsiskverbti mezoterapijos veikliosioms medžiagoms. Didžiausias šio metodo privalumas yra tai, kad jame nenaudojama adatų, kurios yra būtinos tradiciniams mezoterapijos metodams. Šalčio derinimo su neinvazine mezoterapija taikymas apsaugo odą ir neleidžia veikiantiems ingredientams prasiskverbti į kraujotaką. Šių metodų derinimas yra naudingas, kai po tam tikrų kosmetinių procedūrų reikalingas raminantis poveikis.

Šiluma yra taikoma su neinvazine mezoterapija, norint pasiekti gilesnį produktų įsiskverbimą. Šiluma taip pat suteikia atpalaiduojantį poveikį odai ir raumenims.



Mesotherapy: Penetration

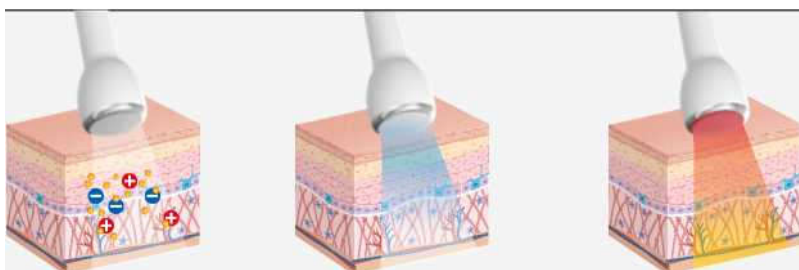



Produktų įsiskverbimas.

Elektroporacija leidžia veikliosioms medžiagoms prasiskverbti pro odą, sustiprindama jų poveikį. Aktyvūs ingredientai gali būti stabdantys aknę, pigmentaciją, senėjimą ar plaukų slinkimą.

Didesnis aktyviųjų ingredientų įsiskverbimas pastebimai pagerina gydymo rezultatus.

Po kitų procedūrų:

Šalčio terapija puikiai tinka po agresyvių procedūrų (pvz.: lazeris), nes puikiai sumažina odos paraudimą, atvėsina odą ir sumažina tikimybę atsirasti hiperpigmentacijai arba hipopigmentacijai.

PRIVALUMAI

- Aukštas įsiskverbimo laipsnis atliekant elektroporaciją
- lengva valdyti. Iš anksto pasiruošti nereikia
- Galima derinti su visų tipų tirpalais (vitaminu C / jonizuotu tirpalu)
- Leidžia nustatyti pulso poliškumą (+) (-)
- Sumažina hiperpigmentacijos riziką (PIH rizika)
- Kompaktiška, lengva ir nešiojama įranga
- Galima naudoti bet kokio tipo odai bet kuriuo metų laiku
- Neskausminga ir neinvazinė procedūra
- Nepažeidžia odos paviršiaus ar audinių

ACCU^{derma}



• ORYOMSIŲ TERAPIJŲ TECHNOLOGIJOS

Maksimalus energijos sunaudojimas: 80W
Valdymas: yra 7 valdymo mygtukai ir rankenėlė

Išėjimo dažnis: nuo 1100 iki 1700 Hz

Intensyvumas: nuo 0 iki 99

Pulsavimo trukmė: nuo 160 iki 230 mikro sekundžių

Darbo ciklas: nuo 0.1 iki 2 sekundžių

Pertrauka: 0.4 sekundės

Įtampa: 120Vpp

Temperatūra: šaltis nuo -15°C iki 10°C

karštis nuo 30°C iki 45°C

Procedūros trukmė: nuo 1 iki 60 min

Išmatavimai: 300mm x 260mm x 200mm

Svoris: 5.5 kg



TERMOSALUD

MEDICAL
& ESTHETIC

Atstovas Lietuvoje UAB Grožio gidas

www.grozis24.lt

Tel. 8-610-27691



ISO 13485

certificate:
0199.2018

